



## AutoCap-96

### 螺旋盖存储管开/关盖机


AutoCap-96是耐优生物最新推出的一款螺旋盖存储管开/关盖机,可以实现高通量、便捷化和自动化的存储管开/关盖功能,是各类化合物库和生物样品库实验室自动化样本保存的理想选择。

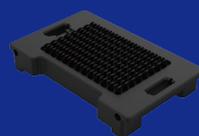

螺旋盖开关盖适配器

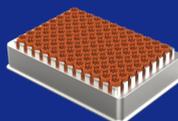

螺旋盖托盘

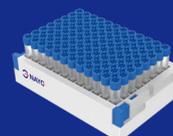

螺帽储存管

## 产品特点

### ❖ 适配性广

AutoCap-96配备不同类型的存储管螺旋盖开关盖适配器,能够适配来自不同厂家的SBS规格的多种样品储存管类型,支持快速更换;  
同时可以根据客户需求进行功能定制。

### ❖ 通量高、速度快


可以在30秒内完成整板96支螺旋盖存储管开盖。

### ❖ 易于使用

8英寸超大触摸屏实现即时控制;  
防过拧紧设计,精准的扭矩控制有效降低适配器的磨损。


### ❖ 便于集成

设有对外数据接口,方便自动化工作流程集成。

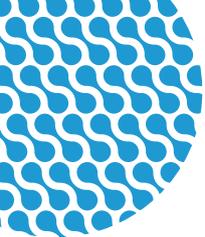

## 产品参数

产品型号	AutoCap-96	
尺寸(W×D×H)	470mm×260mm×360mm	
重量	24kg	
电源	交流电压	100V~240V
	交流电频率	50/60Hz
适配管型	FluidX、LVL、博美达、海尔等品牌；SBS 规格96孔旋盖存储管；支持客户定制	
开关盖检测	配备12组红外检测器，准确判定开/关盖失败的位置	
托盘位置检测	配备托盘位置感应器，轻微碰撞不影响正常开/关盖功能	
开关盖模式	单次开/关盖及连续开/关盖两种模式	
急停功能	支持急停功能	
自动化集成	RS232协议集成与控制	

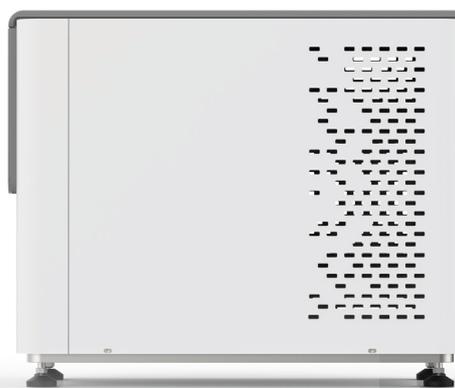

耐优生物技术(上海)有限公司

电话:021-50880570

地址:上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧  
广场11B幢5F

[www.nayolab.com](http://www.nayolab.com)