

NAYO Heater Shakers Module

耐优加热振荡模组

耐优加热振荡模组外观小巧，设计紧凑，方便整合于自动化工作站，具备稳定的加热、混匀样本能力。



- ☑ 分子生物学
- ☑ 细胞生物学
- ☑ 药物研发
- ☑ 化学合成

产品特点

✦ 自动化程度高

精确的自动原位定位功能；支持自动夹紧功能

✦ 安全性高

低速启动功能防溢出，振动平稳

✦ 集成度高

内部集成PCB，无需额外控制单元


✦ 升温迅速

内置大功率加热单元，升温迅速



产品参数

产品型号	MHS-12/20/30-S	
外观	尺寸(W×D×H)	140mm×98mm×60.6mm
	外壳材质	铝
电源	电压	24V DC
	最大功率	120W
温控范围	RT~+99°C	
振荡性能	振荡频率	200~2000rpm / 200~3000rpm / 200~5000rpm
	振幅	1.2 mm / 2.0 mm / 3.0 mm
	转速精度	±25rpm
定位性能	自动原位定位	
	自动夹紧	
	定位精度	±0.1mm
通讯接口	RS422/485	

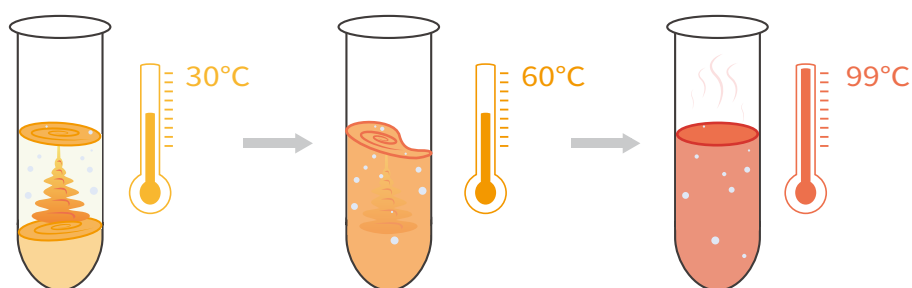

耐优生物技术(上海)有限公司

电话:021-50880570

地址:上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧
广场11B幢5F

 www.nayolab.com