

NAYO Temperature Control Module

耐优温控模组

耐优温控模组外观小巧, 设计紧凑, 方便整合于自动化工作站, 具备稳定的温度控制性能。



- ☑ 试剂保存
- ☑ 提取纯化
- ☑ 文库构建
- ☑ 酶促反应

产品特点

✦ 控温准确

专业控温校准和补偿技术, 充分保证控温精准

✦ 变温快速



高功率帕尔贴半导体控温技术配合专业风道冷却系统, 全力提升变温速度


✦ 集成度高

内部集成PCB, 无需额外控制单元

✦ 兼容性强





兼容1-384孔的SBS尺寸的微孔板、1.5/2ml离心管等

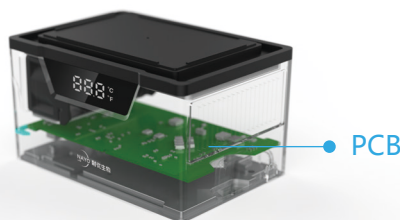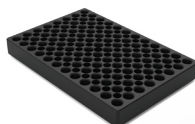

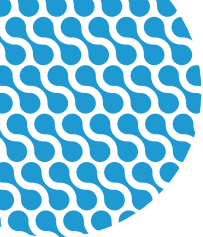

产品参数

产品型号	MT-120-S	
外观	尺寸(W×D×H)	140mm×98mm×81mm
	外壳材质	HIPS
电源	电压	24V DC
	最大功率	120W
温度性能	温度范围	0℃ - 120℃
	温度准确性	±0.5℃ at 37℃
	温度均一性	±0.5℃ at 37℃
通讯接口	RS422/485	

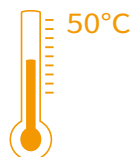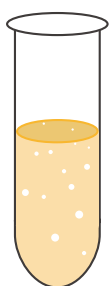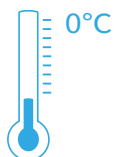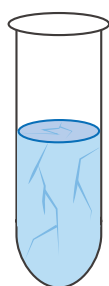

耐优生物技术(上海)有限公司

电话:021-50880570

地址:上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧
广场11B幢5F

 www.nayolab.com