


## 产品参数

|             | A8 Mini   | A8 Pro   |
|-------------|---|--|
|             |  |  |
| 尺寸(W×D×H)   | 714mm×508mm×609mm   | 750/1200mm×730mm×890mm   |
| 重量          | 41.2kg  | 128kg  |
| 电源          | ~100-240 VAC, 50/60Hz   |  |
| 机械臂         | 8通道移液模块   |  |
|             | 灵活单/双通道移液模块   |  |
|             | 抓扳手   |  |
| 板位数         | 11  | 20-35  |
| 移液原理        | 空气置换  |  |
| 移液体积        | 1μL-1000μL  |  |
| 液面探测        | 压力感应  |  |
| 移液精度 CV (%) | 2μL<5% ; 200μL<0.75%  |  |
| 机械臂精度       | ± 0.1 mm  |  |
| 安全防护        | 可放入安全柜  | UV & HEPA  |

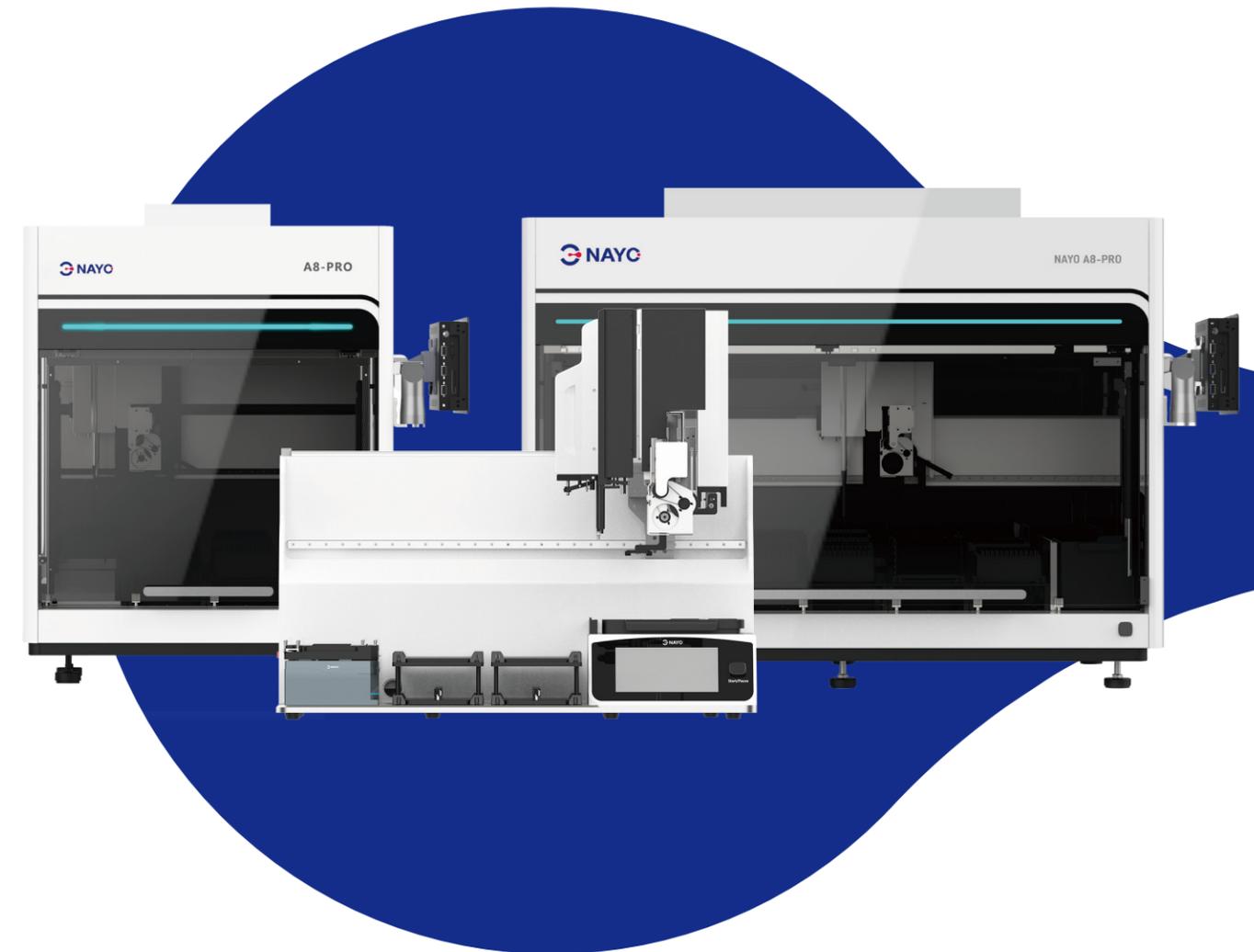

# A8 系列

## 液体工作站

✦ 灵活

✦ 安全

✦ 紧凑

✦ 可追溯



耐优生物技术(上海)有限公司  
电话:021-50880570  
地址:上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧广场11B幢5F

[www.nayolab.com](http://www.nayolab.com)




By Precision, For Simplicity

[www.nayolab.com](http://www.nayolab.com)

# A8 系列 液体工作站

## 模块化和可扩展的设计, 适配各种灵活需求

- 固定8通道、灵活单/双通道移液模块及抓手手可灵活配置
- 工作台长度可定制, 以满足不同通量的要求
- 多种自有模块及第三方模块集成, 适应各种应用需求

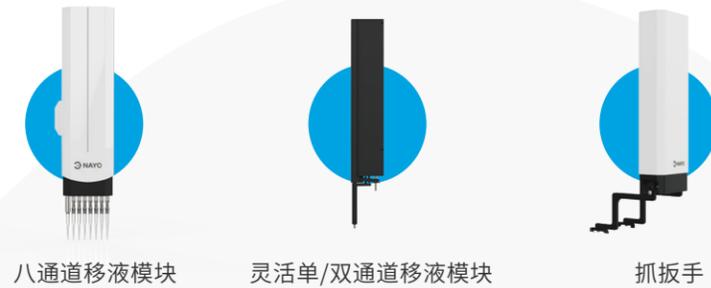

## 全面过程监控极大增加无人值守时间

- 具有压力液面探测 (pLLD) 功能, 实时监测移液状态
- 在抓手手运输过程中可进行状态监控



## 图形化界面, 易于使用

- 一键启动, 简化处理流程
- 图形化拖拽式界面, 易于上手



## 集成设备




SC10 系列旋转板栈




螺旋盖存储管开/关盖机

## 集成模组

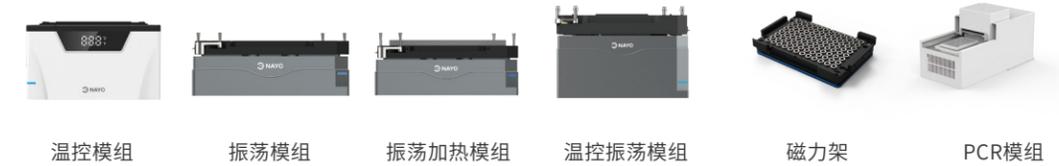

## 第三方设备

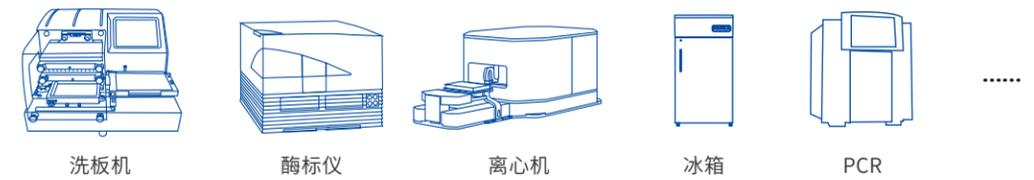

# 应用

细胞生物学

分子生物学

毒理学

药物发现

临床诊断

二代测序

合成生物学

蛋白组学

生物样本库