

NR-1400 核酸提取及病原微生物检测系统


应用

NR-1400 核酸提取及病原微生物检测系统可针对 SARS-CoV-2 检测，提供完全无人值守的高通量自动化解决方案。即由 3 台 chemagic™ 360 自动化核酸提取仪提取 SARS-CoV-2 样本的病毒 RNA，由耐优 A8 pro 准备 RT-PCR 体系配置，并在 1 台 (或 2 台) 整合式 RT-qPCR 仪上进行检测。

组件


耐优 Flex750EXT 机械臂	3x chemagic™ 360 全自动核酸提取仪
耐优 A8 pro 8+2 液体工作站	4titude®自动封膜机
耐优 SC-10 旋转板栈	BioTek® MultiFlo™快速分液器
Analytik Jena® qTOWER3 全自动 qPCR 扩增仪	



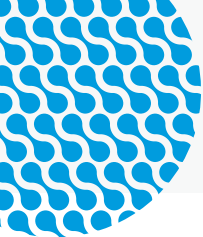

NR-1400

核酸提取及病原微生物检测系统

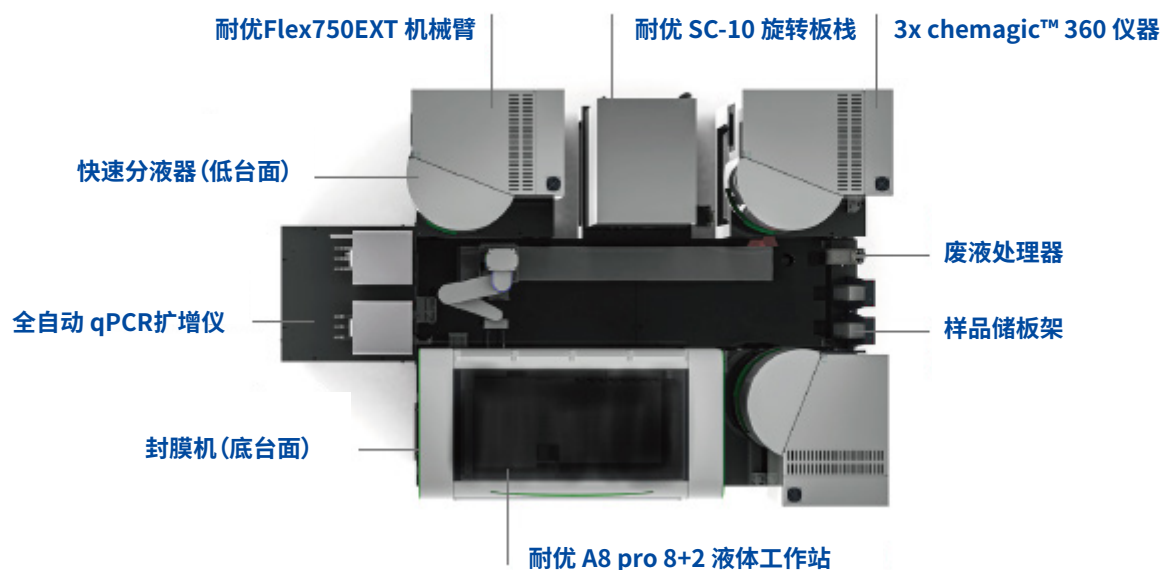

亮点

- NR-1400 核酸提取及病原微生物检测系统与耐优 A8 pro 8+2 液体工作站搭配使用通量和灵活性兼备
- 通量:24 小时内约 4600 个样品
- 系统可完全处理多达 1900 个样品,无需用户交互
- 经设计,可全天候运行,操作员可在样品可用时将其排队
- 专用废液管理方案
- 提供硬件兼试剂
- 也可用作中等通量仪器,配备 2 台 chemagic 360 提取器

仅供研究使用,不可用于临床诊断。



耐优生物技术(上海)有限公司

电话: 021-50880570

地址: 上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧广场11B幢5F

www.nayolab.com